

Logen- en zurenkast

„The Resister“ - wanneer het agressief wordt

Optimale geventileerde opslag voor uw logen- en zuren
Gescheiden compartimentering met standaard aangebrachte schuifplateaus
en vloeistofdichte kunststof opvangbakken.

Veilige en goedgekeurde opslag van agressieve stoffen op de werkplek.

Speciale kast voor de veilige bewaring van corrosieve gevaarlijke stoffen, in het bijzonder zuren en logen. Niet geschikt voor de bewaring van brandbare vloeistoffen!

Constructie

- Buitenkant gemaakt van plaatstaal, afgewerkt met een epoxy coating RAL 7035
- De dubbelwandige kast is inwendig volledig van kunststof, afgewerkt met een melamine kunststof toplaag voor een hoge chemische weerstand.
- Kunststof afdichtingen rondom de deuren voorkomen dat dampen buiten de kast treden.
- Speciale kunststof afdichtprofielen voorkomen dat er gevaarlijke dampen van binnenin de kast ontsnappen
- **Twee hermetisch gescheiden compartimenten**
- Verstelbare poten om een oneffen vloer te compenseren
- **Volledig deurvergrendelingsmechanisme buiten het**

compartiment, verhoogde bescherming van bewegende en veiligheidsrelevante onderdelen tegen corrosie

Draaideuren

- Gaan meer dan 90° open, kastinterieur vrij toegankelijk.
- Elke deur kan apart worden gebruikt en vergrendeld (cilinderslot, kan in het bestaand masterkeysysteem worden geïntegreerd)

Uittrekbare legborden

- Gelagerd, volledig uittrekbaar, licht bedienbaar.
- Veilig uitnemen van emballage.
- Schuifplateaus met uitneembare vloeistofdichte PP-kunststof opvangbakken met een hoge chemische weerstand, inhoud **ca. 15 liter.**

Ventilatie

- Corrosiebestendige luchtkanalen vrij van metaal

- Gescheiden afzuiging per compartiment.
- Gelijktijdige en gelijkmatige ventilatie van beide compartimenten, met één afzuigaansluiting aan de bovenkant van de kast.

RAL 7035



Schuifplateaus



uitneembare kunststof opvangbakken

Logen- en zurenkast



Model SL.196.120

Breedte van de kast 1200 mm met 12 schuifplateaus incl. uitneembare opvangbakken en 2 compartimenten. (pag. 66)



Model SL.196.60

Breedte van de kast 1200 mm met 6 schuifplateaus incl. uitneembare opvangbakken en 2 compartimenten. (pag. 66)



Model SL.60.110

Breedte van de kast 1100 mm met 4 schuifplateaus incl. uitneembare opvangbakken en 2 compartimenten. (pag. 67)



Model SL.60.59

Breedte van de kast 600 mm met 2 schuifplateaus incl. uitneembare opvangbakken, 1 compartiment. (pag. 67)



Logen- en zurenkast



Model SL.196.120-12

Bestelnr. 11-1222 A: met 12 schuifplateaus incl. opvangbakken



Model SL.196.60-6

Bestelnr. 11-1224 A: met 6 schuifplateaus incl. opvangbakken

„The Resister“

wanneer het agressief wordt

Logen- en zurenkast met 2 gescheiden compartimenten voor een veilige opslag van corrosieve en agressieve stoffen op de werkplek. Niet toegestaan voor de opslag van brandbare vloeistoffen!

SL.196.120



Technische informatie

- Afmetingen B x D x H (mm):
uitwendig **ca. 1200 x 605 x 1970**
inwendig **ca. 485 x 565 x 1865**
(per compartiment)
- Gewicht kast **ca. 160 kg**
- Afmeting kunststof opvangbak
B x D x H (mm): **ca. 430 x 475 x 80**
- Opvangcapaciteit: **ca. 15 l**
- Belastbaar tot **25 kg**
(verdeelde belasting)

SL.196.60

Technische informatie

- Afmetingen B x D x H (mm):
uitwendig **ca. 600 x 600 x 1970**
inwendig **ca. 485 x 565 x 930**
(per compartiment)
- Gewicht kast **ca. 125 kg**
- Afmeting kunststof opvangbak
B x D x H (mm): **ca. 430 x 475 x 80**
- Opvangcapaciteit **15 l**
- Belastbaar tot **25 kg**
(verdeelde belasting)

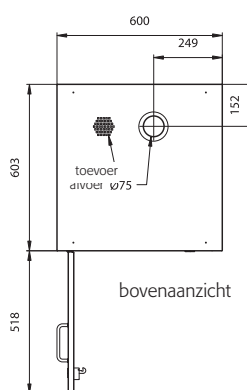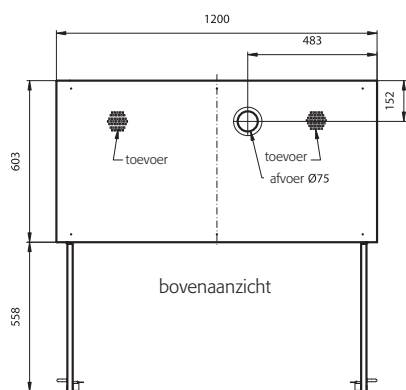

Logen- en zurenkast

Model	Materiaal, kleur	B x D x H (mm)	Bestelnr.
SL.196.120 , Logen- en zurenkast (excl. interieur)	lichtgrijs, RAL 7035	1200 x 605 x 1970	11-1223 A
8 schuifplateaus	met kunststof opvangbakken		2 x 51-1326 A
12 schuifplateaus	met kunststof opvangbakken		2 x 51-1339 A
SL.196.160 , Logen- en zurenkast, linksdraaiende deur (excl. interieur)	lichtgrijs, RAL 7035	600 x 600 x 1970	11-1225 A
SL.196.160-R , Logen- en zurenkast, rechtsdraaiende deur (excl. interieur)	lichtgrijs, RAL 7035	600 x 600 x 1970	11-1226 A
4 schuifplateaus	met kunststof opvangbakken		51-1326 A
6 schuifplateaus	met kunststof opvangbakken		51-1339 A

levering DDP op eenmalige pallet.

Optioneel : Levering op gebruikersplaats, zie pagina 175

Levertijd: 4-6 weken

LF8



Logen- en zurenkast





Model SL.60-110-4

Bestelnr. 11-1227 A: met sokkel, 4 schuifplateaus incl. opvangbakken



Model SL.60.59-R-2

Bestelnr. 11-1229 A: met sokkel, 2 schuifplateaus incl. opvangbakken

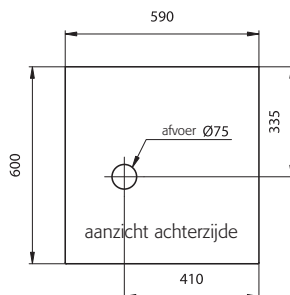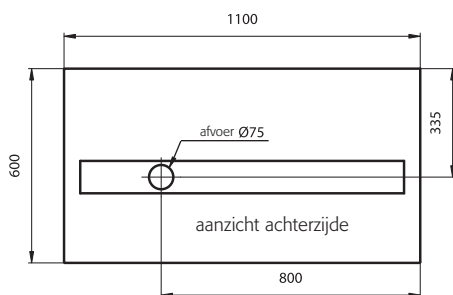

„The Resister“

wanneer het agressief wordt

Logen- en zurenkast voor een veilige opslag van corrosieve en agressieve stoffen op de werkplek.

Niet toegestaan voor de opslag van brandbare vloeistoffen!

SL.60.110

Technische informatie

- Afmetingen B x D x H (mm):
uitwendig **ca. 1100 x 570 x 600**
(totaal diepte incl. afzuigkanaal 620 mm)
inwendig **ca. 485 x 550 x 530**
(per compartiment)
- Gewicht kast **ca. 60 kg**
- Afmeting kunststof opvangbak:
B x D x H (mm): **ca. 430 x 475 x 80**
- Opvangcapaciteit **15 l.**
- Belastbaar tot **25 kg**
(verdeelde belasting)

SL.60.59

Technische informatie

- Afmetingen B x D x H (mm):
uitwendig **ca. 590 x 570 x 600**
(totale diepte incl. afzuigkanaal 670 mm)
inwendig **ca. 480 x 530 x 560**
- Gewicht kast **ca. 40 kg**
- Afmeting kunststof opvangbak:
B x D x H (mm): **ca. 430 x 475 x 80**
- Opvangcapaciteit **ca. 15 l.**
- Belastbaar tot **25 kg**
(verdeelde belasting)

Logen- en zurenkast

Model	Materiaal, kleur	B x D x H (mm)	Bestelnr.
SL.60.110 , Logen- en zurenkast (onderbouw, excl. interieur)	lichtgrijs, R AL 7035	1100 x 570 x 600	11-1228 A
Sokkel	geëpoxideerd staal, RAL 7035	hoogte 30	51-1077 A
Sokkel	geëpoxideerd staal, RAL 7035	hoogte 65	51-1078 A
2 schuifplateaus	met kunststof opvangbakken		51-1263 A
4 schuifplateaus	met kunststof opvangbakken		51-1261 A
SL.60.59 , Logen- en zurenkast, linksdraaiende deur (excl. interieur)	lichtgrijs, RAL 7035	590 x 570 x 600	11-1230 A
SL.60.59-R , Logen- en zurenkast, rechtsdraaiende deur (excl. interieur)	lichtgrijs, RAL 7035	590 x 570 x 600	11-1231 A
Sokkel	geëpoxideerd staal, RAL 7035	hoogte 30	51-1083 A
Sokkel	geëpoxideerd staal, RAL 7035	hoogte 65	51-1084 A
1 schuifplateau	met kunststof opvangbak		51-1271 A
2 schuifplateaus	met kunststof opvangbakken		51-1263 A

levering DDP op eenmalige pallet.

Optioneel : Levering op gebruikersplaats, zie pagina 175

Levertijd: 4-6 weken

LFR