




1^{er} fabricant européen d'armoires de sécurité
pour produits chimiques

UNE SÉCURITÉ MAXIMALE, DOUBLE CERTIFICATION.



Made
in
Germany

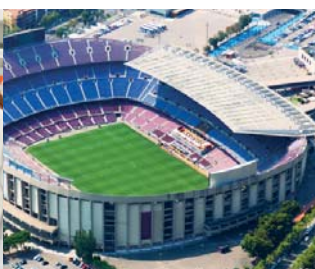

Armoires de sécurité résistantes au feu pour le stockage et la manipulation
de produits inflammables dans des zones à risques élevés.

Lors d'un incendie le temps est précieux pour prolonger la durée d'évacuation afin d'éviter des blessés, des morts et protéger les locaux, les investissements.

Les armoires de sécurité EN 14470-1 sont parfaitement adaptées à des sites stratégiques, éloignés des services d'urgence, de lutte contre l'incendie:

- Universités et hôpitaux
- Laboratoires et centres de recherche
- Centres commerciaux, complexes sportifs, collectivités
- Navires de croisière, transports maritimes
- Plates-formes pétrolières, centrales nucléaires
- Sites de production

Armoires de sécurités résistantes au feu pour les zones à risques élevés.

Tous les modèles sont approuvés et certifiés EN 14470-1, EN 14727, GS & FM et répondent aux exigences **NFPA Code 30, NFPA 1 Fire Code, OSHA**.



- 1 Construction robuste avec un Design moderne bicolore**
Construction extrêmement robuste avec une surface résistante aux éraflures et chocs,
- 2 Portes classiques**, à triple charnière, arrêt des portes dans toutes les positions, fermeture automatique en cas d'incendie.
- 3 Equipements intérieurs modulables** - Grand choix d'équipements intérieurs personnalisables selon les besoins.
- 4 Joint thermo-dilatant** protégé par un premier joint de protection afin d'éviter tout contact avec les sources de chaleurs.
- 5 Système de ventilation** assure une ventilation complète à l'intérieur de l'armoire. Contrôle visuel du bon fonctionnement de l'extraction d'air grâce à la rotation d'une hélice.
- 6 Fermeture sécurisée**, à clé avec indicateur (rouge-vert) signalant si l'armoire est fermée ou non.
- 7 Socle de transport intégré**, apporte une grande flexibilité, transport facile.
- 8 Dispositif de mise à niveau intégré dans le socle.**
Compensation rapide et efficace pour plancher inégal.

Visualisez nos videos sur :
YouTube/asecosChannel



Armoires de sécurité résistantes au feu type 90 minutes



Couleur du corps : Gris anthracite RAL 7016
Couleur des portes : Jaune sécurité RAL 1004



Q90.195.120



Q90.195.090



Q90.195.060

Modèle	Q90.195.120	Q90.195.090	Q90.195.060
Code article	34632-040-34637	34623-040-34628	34610-040-34617
Dimensions extérieures L x P x H (mm)	1193 x 615 x 1953 mm	893 x 615 x 1953 mm	599 x 615 x 1953 mm
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	1050 x 522 x 1647 mm	750 x 522 x 1647 mm	450 x 522 x 1647 mm
Équipement intérieur standard	3 étagères 1 Bac de rétention 1 Caillebotis	3 étagères 1 Bac de rétention 1 Caillebotis	3 étagères 1 Bac de rétention 1 Caillebotis
Poids sans équipement intérieur	424 kg	343 kg	265 kg

Armoires de sécurité résistantes au feu type 30 minutes



Couleur du corps : Gris anthracite RAL 7016
Couleur des portes : Jaune sécurité RAL 1004



Q30.195.116



Q30.195.086.WD



Q30.195.056

Modèle	Q30.195.116	Q30.195.086.WD	Q30.195.056
Code article	34659-060-34637	34649-060-34628	34641-060-34617
Dimensions extérieures L x P x H (mm)	1164 x 620 x 1947 mm	864 x 620 x 1947 mm	564 x 620 x 1947 mm
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	1050 x 519 x 1626 mm	750 x 519 x 1626 mm	450 x 519 x 1626 mm
Équipement intérieur standard	3 étagères 1 Bac de rétention 1 Caillebotis	3 étagères 1 Bac de rétention 1 Caillebotis	3 étagères 1 Bac de rétention 1 Caillebotis
Poids sans équipement intérieur	240 kg	195 kg	146 kg

D'autre(s) option(s), équipements intérieurs disponibles sur simple demande.

Le nom asecos est synonyme de « security » et « ecology ». Sécurité et protection des biens et des personnes au cours du stockage et de la manipulation de produits chimiques. asecos, depuis sa création 1994, est localisée à Gründau (Allemagne / Hessen) et conçoit, développe, l'ensemble de ses solutions techniques. asecos est fabricant, leader européen des armoires de sécurité et est reconnue pour sa constante croissance, son innovation technique permanente.



asecos Sarl

Sécurité et protection de l'environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
F-57070 Metz (Technopôle)

Tél. : +33 (0)3.87.78.62.80
Fax : +33 (0)3.87.78.43.19
info@asecos.fr

Contactez notre équipe d'experts: Vos interlocuteurs



Thierry Bies
Directeur filiale France

☎ +33 (0)3.87.78.62.81
✉ +33 (0)6.14.04.27.81
» t.bies@asecos.fr



Louis-Vincent Vecchione
Responsable commercial
France et Maghreb

☎ +33 (0)3.87.78.62.80
✉ +33 (0)6.48.46.61.50
» lv.vecchione@asecos.fr



Fabien Pethe
Responsable Administration
des Ventes

☎ +33 (0)3.87.78.62.85
» f.pethe@asecos.fr



Cathy Kurdykowski
Technico-commerciale
sédentaire

☎ +33 (0)3.87.78.62.84
» c.kurdykowski@asecos.fr



Clinique de Fulda
Allemagne



Université Sussex
Angleterre



Endress + Hauser
Suisse



Charles Perkins Centre
Australie